

User Manual A10
Please Read the Manual before Use

Table of contents 1

Product description 2

Parts name 3

Introduction for wireless mode 4

How to charge the battery 4

How to apply the needle cartridge 5

Adjustment of needle length 6

Speed display and adjustment 6

Needle cartridge introduction 7

Reference chart 8

Precaution 9

Warranty 10


Product description 2

The device consists of an electric microneedling pen and disposable needle cartridges. This manual will explain how to use each component in detail.

The device is used to improve the appearance of the skin and reduce signs of aging. It is intended to stimulate the skin with micro-needles for collagen and elastin production. The micro-channels created on surface skin by device also help with the absorption of skin serums.

There are 5 different types of needle cartridges designed for the device. These cartridges can be used for micro-needling treatment and nano-needling treatment.

Parts name 3




Introduction for wireless mode 4

Wireless Model: Dr.pen A10
This model is powered by a built-in battery. It can work wirelessly. The power cable and the adapter are used to charge the device when the battery is low.


How to charge the battery

Connect the device to the adapter with power cable, and plug the adapter into a live AC outlet to charge the device. Charging will be completed within 2 hour.

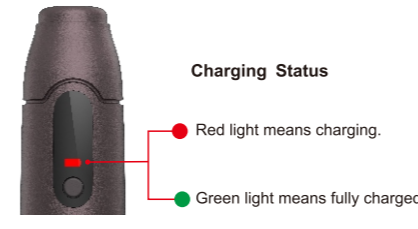


How to apply the needle cartridge 5

Preparation
1. Take out needle cartridge from the sterilized packaging. (Fig1)

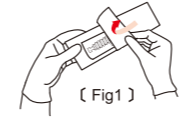

2. Find the "U" shape notch on the cartridge, align the notch with the dot on the bottom of the device, and slightly push the cartridge into the device. (Fig2)

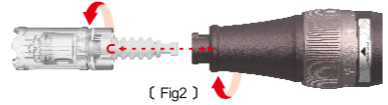

3. Lock the needle cartridge to the device by turning it clockwise.

4. Turn the needle cartridge counterclockwise and pull it out when you would like to remove the cartridge.


5. Start the device only if the needle cartridge is assembled correctly. Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn on/off the device.

The needle cartridge is designed for single use.
Place the used needle cartridges in a trash container. If the needle cartridge is contaminated inadvertently during installation (i.e. dropped on the floor, package opened/damaged). The needle cartridge may be contaminated. Please discard it and get a new needle cartridge.

Adjustment of needle length 6


Choose suitable needle length according to different treating area and skin problem.

Adjust needle depth by turning the scale adjustment ring. The depth of needle should be adjusted after starting the pen. The scale number aligning with the scale point shows the current needle depth. (Fig3)




Speed display and adjustment

LED light speed display
The blue light turns on when the machine starts.

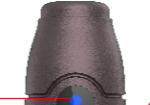

5 Speeds Adjustment
Press the button to change the speed. Turning on one more light means the speed increasing 1 level.

Needle cartridge introduction 7

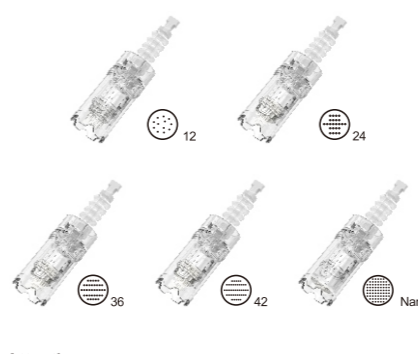

Attention
The needle cartridge is designed for Dr.pen A10 only. The needle cartridge is disposable. Please sterilize the needle cartridge with 75% alcohol for few minutes before use. Please dispose the used needle cartridge to the trash container.

Reference chart 8

REGION	NEEDLE DEPTH (MM)
Forehead	0.25 - 0.5
Between the eyebrows	0.25 - 0.5
Nose	0.25
The Area around eyes	0.25
Cheek and Chin	0.5 - 1.0
Surgical scar or wrinkle	2.5

Specification

Product name: Auto-stamp Motorized Meso Machine
Model name: Dr.pen A10
Adapter: Input: 100-240V 50-60HZ Output: 5V-1000mA
Package Weight: 345 g
Package Size: 169*123*56 mm

Item	Quantity
Hand Piece	1 pc
Adapter	1 pc
Manual	1 pc
Power Cable	1 pc
Needle Cartridge	2 pcs

Precaution 9

Please be sure to read the instructions before use and follow as described.

Do not apply it to the person as following:
1. Do not use on areas of severely damaged skin.
2. Do not use on areas with high temperature, dust or humidity.
3. Do not use on areas with high pressure.
4. Do not use on areas with high pressure.
5. Do not use on areas with high pressure.
6. Do not use on areas with high pressure.
7. Do not use on areas with high pressure.

General maintenance
Make sure to inspect the device and adapter before use.
Keep the device with power off. Wipe its surface out with a disinfecting wipes.
Pay attention to clean areas such as crevices, seams, and areas where the needle cartridge attaches to the device.
Keep it away from direct sunlight or high temperature and humidity.
Do not leave the measurement, repair or alter of the device to non-professional staff.
When you use the device which has not been used for a long time, make sure to check if it works properly with safety.

Warranty 10

The warranty period of the device is 12 months. We offer repair service from the purchase date. If any of our products has damages or natural trouble, we provide replacements or repair service. The use of third-party cartridges can cause damage to your device. This could invalidate your warranty.



使用说明 A10
使用前请阅读说明书

目录 1

产品描述 2

部件名称 3

充电款介绍 4

充电步骤 4

导入头装配 5

针长调节 6

档位展示和调节 6

可用导入头 7

针长使用推荐 8

规格 8

注意事项 9

保修事项 10

产品描述 2

该产品包含一支微针导入仪和一次性使用导入头。本手册将详细介绍各个组件的使用方法。

该设备用于改善皮肤外观和减少衰老痕迹。它的原理是用微针刺激皮肤帮助胶原蛋白和弹性蛋白再生。该设备在皮肤表面形成的微通道有助于护肤精华的吸收。

该设备有5种不同型号的导入头；可用于微针法和纳米针法。

部件名称 3



充电款介绍 4

充电款:
充电款可以无线工作, 由内置电池供电。当电池电量不足时, 请使用电源线和适配器给设备充电。


充电步骤

用电源线将设备连接到适配器上; 并将适配器插入到交流插座, 开始充电。2小时即可完成充电。




导入头装配 5


导入头使用准备
1. 把导入头从包装袋内取出。(图1)



2. 找到导入头上的“U”形点, 将“U”形点与设备前端的圆点对齐, 将导入头轻轻推入设备。(图2)

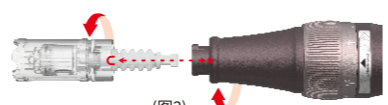

3. 顺时针旋转导入头, 将导入头锁定在设备上。(图3)

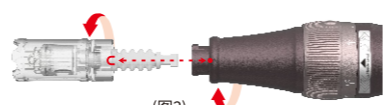

4. 如果想取下导入头, 先将针轴转动导入头, 然后从设备轻轻拉出。


5. 确保导入头正确装配时才能启动设备。长按电源按钮2-3秒, 开启或者关闭设备。

安装拆卸导入头时, 请确保导入头的U形点与设备前端的圆点对齐。

导入头只能一次性使用。将用过的导入头放入有害垃圾袋中。如果安装时不慎污染导入头, (如掉在地上、包装被打开/损坏) 导入头可能无法使用, 请丢弃它, 换一个新的导入头。


针长调节 6

根据不同的治疗区域和皮肤问题使用合适的导入头。通过旋转刻度调节环, 进行针长调节。针长调节需要在设备启动后进行。与刻度点对齐的刻度环数字表示当前的针深度。(图3)




档位展示和调节

LED档位显示
当设备启动后显示蓝色灯光



5档速度调节
通过按下档位按钮来改变设备速度。多一盏灯亮起指示速度增加1档。

可用导入头 7

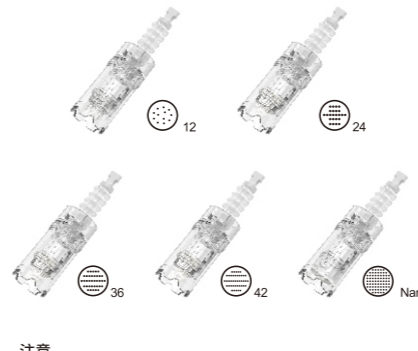

注意
导入头是专为 Dr.pen A10 设计。导入头是一次性使用。使用前请对75%浓度的医用酒精消毒导入头。请将使用过的导入头扔进有害垃圾容器。

针长使用推荐 8

区域	针长(毫米)
额头	0.25 - 0.5
眉间	0.25 - 0.5
鼻子	0.25
眼周	0.25
脸颊和下巴	0.5 - 1.0
疤痕和皱纹	2.5

规格

产品名称: 微针导入仪
型号: A10
适配器
输入: 100-240V 50-60HZ
输出: 5V-1000mA
包装尺寸: 169*123*56MM
包装重量: 345g

项目	数量
手柄	1支
适配器	1个
说明书	1本
电源线	1条
导入头	2个

注意事项 9

请务必仔细阅读说明书, 并遵照说明进行操作。

请勿用于以下人群:
1. 皮肤有严重破损或炎症者。
2. 皮肤有严重敏感者。
3. 皮肤有严重敏感者。
4. 皮肤有严重敏感者。
5. 皮肤有严重敏感者。
6. 皮肤有严重敏感者。
7. 皮肤有严重敏感者。

日常维护
使用前要检查设备和适配器。保持设备处于关机状态; 用消毒湿巾擦拭其表面。注意清洁缝隙、按钮、导入头与设备连接的前面区域。不要将设备放置在阳光直射, 高温或潮湿的环境中。不要让非专业人员测量、维修或更换设备零件。针对长时间未使用的设备, 使用前请务必检查设备是否正常工作。

保修事项 10

从购买之日起设备保修期为12个月, 我们提供维修服务。如果产品有因为损坏或自然故障, 我们提供更换或维修服务。使用第三方导入头可能会对您的设备造成损坏; 这可能会使保修失效。